

アプリケーションカタログ 硝酸の濃度

関連業界	:	無機工業品
使用装置	:	電位差自動滴定装置
測定手法	:	酸塩基滴定
関連規格	:	JIS K 8541

1. 概要

硝酸の濃度の測定は、「JIS K 8541-2006 硝酸（試薬）」および「ISO 6353-2：1983 Reagents for chemical analysis-Part 2：Specifications -- First series」に基づいて、試料を電位差滴定法により1mol/L 水酸化ナトリウム溶液で当量点まで滴定します。当量点は、滴定曲線の最大変曲点です。1mol/L 水酸化ナトリウム溶液の滴定量から硝酸濃度を算出します。


2. 装置構成

本体	:	電位差自動滴定装置（標準プリアンプリファイア STD-1）
電極	:	複合ガラス電極 温度補償電極

3. 試薬

滴定液	:	1mol/L 水酸化ナトリウム溶液（f=0.9676）
溶媒	:	純水

4. 測定例

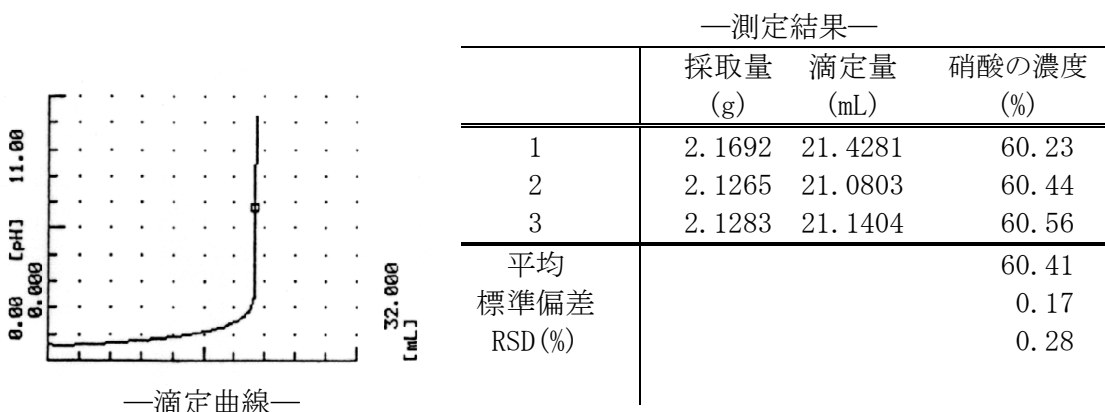

詳細は、下記までお気軽にお問い合わせください。

<問い合わせ先> 京都電子工業株式会社

<http://www.kyoto-kem.com/ja/contact/form.php>